


# Esterira de massagem *Black*

Manual de Instruções

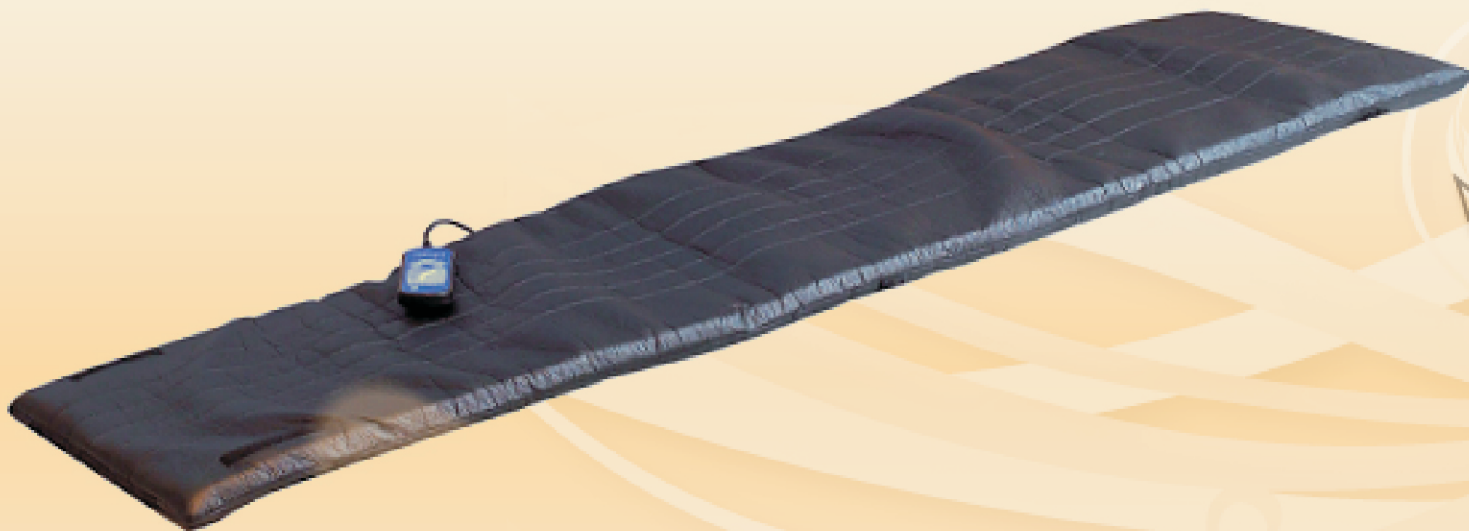

SL-D02

**Massagear**  
Seu relax em um click

# SL-D02

## O PRIMEIRO PASSO PARA A SAÚDE ►►

Primeiramente, nós queremos agradecer a preferência pelo nosso produto.

Por favor leia as instruções cuidadosamente antes de operar este equipamento, e mantenha este manual sempre a mão para consultas posteriores.

Nota: Nós nos reservamos no direito de modificar o desenho ou modelo deste produto sem comunicação prévia.

## FATORES & FUNÇÕES

1. Este equipamento pode ser utilizado tanto no assento do automóvel quanto em casa ou escritório. Fácil controlar, alivia a fadiga ao dirigir.
2. Compacto e portátil.
3. Massagem em duas velocidades, lento e mais rápido. Confortável e efetivo, penetra profundamente nos músculos.
4. Relaxamento garantido

## USO DO CONTROLE

**ON/OFF:** Botão LIGA e DESLIGA

**TIMING:** CRONOMETRANDO

Escolha o tempo de funcionamento de 10 ou 15 minutos (preprogramado) ou 20 minutos com o indicador na posição ON/LIGADO.

**MODE:** MODO

Para selecionar o modo de massagem nos modos de vibrar, rolando, apertando, golpeando, agitando, batendo, e pulsando.

**POSITIONING:** POSICIONANDO


Para posicionar a massagem nas partes diferentes do corpo: ombros, costas, cintura, e pernas.

**INTENSITY:** INTENSIDADE

Para seleção de intensidade, são 5 opções. A intensidade não pode ser mudada quando o o massageador estiver no modo automático ou pulsando.

**SPEED:** VELOCIDADE

Para seleção de velocidade, são 5 opções. A velocidade não pode ser mudada quando os modos automático, vibrando, ou pulsando estiverem selecionados.

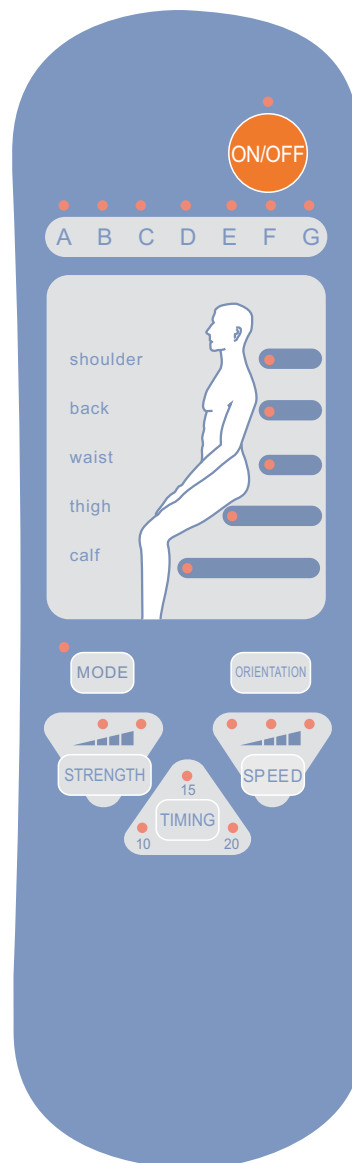

## ESPECIFICAÇÕES

Modelo: SL-D02  
Voltagem: DC12V  
Power: 5W  
Estrutura de segurança: Tipo II

# INSTRUÇÕES DE USO



Para automóvel



Para casa e escritório



## MANUTENÇÃO E ARMAZENAMENTO

1. Por favor pause o equipamento durante 20 minutos toda vez que ele estiver trabalhando por um período contínuo de 15 minutos.
2. Mantenha o equipamento seco e sem pó.
3. Por favor, desligue o equipamento da tomada quando não estiver usando.
4. Não exponha o equipamento diretamente a luz solar.
5. Mantenha o equipamento longe do pó, óleo, fumaça, ou gás cáustico.
6. Se você precisa usar o equipamento em lugares com grande discrepância de temperatura, por favor se assegure que o equipamento não tenha sido usado durante pelo menos uma hora antes de trocar de lugar.
7. Não limpe o equipamento com thinners, ethanol, gasolina e outros produtos químicos que possam danificar a cobertura do equipamento. A cobertura exterior é destacável e lavável.

## GUIA DE DIAGNÓSTICO

Problemas	Possível causa(s)	Solução
O equipamento não Liga	O botão ON não acionado.	Aperte o botão ON
	Má conexão entre o Fio de força e a Tomada.	Confira se o fio esta perfeitamente colocado na tomada com firmeza
Um som é ouvido de repente quando os massageadores estão em funcionamento	Os massageadores estão em funcionamento por tempo muito prolongado	Desligue os massageadores por uma hora
Os massageadores param de repente	Ouve muita pressão aplicada nos massageadores	Reduza a pressão aplicada nos massageadores
	Ouve a parada dos massageadores para proteger o conjunto	Desligue os massageadores por uma hora

### ⚠️ ADVERTÊNCIA

Não use o equipamento quando voltagem não estiver adequada.  
No caso de mau funcionamento, não molhe o controle.  
Não use o equipamento em áreas molhadas como banheiro, piscina ou estância termal.  
Não ponha o equipamento perto de um aquecedor. Não use-o quando sua cobertura exterior estiver rasgada, neste caso a cobertura deveria ser substituída.  
Por favor confira se o equipamento esta desligado antes de conecta-lo a tomada.  
Não puxe ou segure a tomada com as mãos molhadas.  
Por favor se assegure que o equipamento esta desligado quando for desligar o fio da tomada e desligue-o do modo correto.  
Não desmonte e monte este produto quando alguma parte estiver quebrada.  
Por favor contate o revendedor local ou centros de serviço para manutenção ou conserto deste produto.  
Este equipamento pode se tornar parcialmente quente depois de utilizado por longo período, usuários sensíveis ao calor não devem usar continuamente este equipamento.  
Crianças com menos de 12 anos não devem operar este equipamento.  
Mulheres grávidas ou durante os períodos de ciclo menstrual não devem usar este equipamento.

## Garantia

Origem de nossos produtos, finalidade, Assistência Técnica e Garantia.

Vendemos produtos da mais alta qualidade, zelamos pelo bom gosto, durabilidade e bom funcionamento.

Somos importadores e nossas Poltronas de massagens têm número de série constantes em nossas importações, todas elas registradas na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

Todos os nossos produtos têm a finalidade única de relaxamento. Nossos produtos não curam, e não tem qualquer fim terapêutico, o usuário deverá consultar seu médico de confiança para saber se algum problema de saúde podese agravado com o uso.

Assistência técnica e Garantia.

Poltrona de Massagens = **1 ano**

Demais equipamentos = **3 meses**

Nossa Assistência técnica para serviços em garantia é prestada em nossa sede à Avenida Felipe Boller Júnior, 3920, Jardim Santa Rita em Pirassununga, SP, CEP 13.631-120, telefone (19) 3562 8520, e-mail [contato@massagear.com.br](mailto:contato@massagear.com.br) ou onde nossa empresa indicar.

O cliente deverá encaminhar os produtos para assistência técnica preferencialmente com as embalagens originais para evitar avarias durante o transporte e manuseio, não estando mais disponíveis ou em condições de uso deverá providenciar embalagem adequada para o envio. O Cliente poderá consultar nossa disponibilidade de embalagens de transporte, em caso positivo enviaremos a embalagem própria para isso. Os custos de envio serão arcados única e exclusivamente pelo Cliente. Uma autorização para o envio ao nosso estabelecimento será fornecida ao cliente através de e-mail de nossa empresa com formulário próprio. Após a análise e constatado que o produto apresenta problema ou defeito de fabricação as despesas de envio serão reembolsadas, única e exclusivamente na conta corrente do cliente. Em se tratando de defeito ou quebra causada por mau uso do equipamento, queima em decorrência de voltagem errada, oscilação de voltagens, má conservação do equipamento como exposição à umidade ou sol e qualquer outra avaria as despesas de envio não serão reembolsadas e o cliente pagará pelo retorno do produto bem como pelas despesas de manutenção. Por tratar-se de produto importado e eventual falta de peça em nosso estoque o serviço poderá demorar em ser executado, pois o processo de importação é lento e depende de órgãos do governo para liberação de peças e componente, assim já informamos que o prazo mínimo para manutenção é de 30 dias contatos da aprovação da manutenção pelo cliente proprietário.

Estamos à disposição para outros esclarecimentos.

[www.massagear.com.br](http://www.massagear.com.br)

[contato@massagear.com.br](mailto:contato@massagear.com.br)

Telefone: (19) 3562 8520